

*Você conhece as práticas
para ciclo de
Esterilização a Vapor
para Uso Imediato?*

Ciclo de EVUI



NASCE | CME



*Ao produzir dicas práticas
destacamos alguns aspectos
críticos na EVUI que podem
comprometer a garantia da
esterilização. Essas
orientações ajudam você e
sua equipe na adoção de
processos mais seguros.*

nascecme.com.br

*Você conhece as práticas
para ciclo de
Esterilização a Vapor
para Uso Imediato?*



Ciclo de EVUI

NASCE | CME



DICA#1

Use a esterilização a vapor para uso imediato (antigo ciclo flash) adequadamente. Leia artigo 94 inciso 1º RDC nº15 de 2012.

A EVUI deve ser usada somente quando não houver tempo suficiente para processar pelo método indicado.

A EVUI não deve ser usada como um substituto para o inventário insuficiente de instrumentos.

*Você conhece as práticas
para ciclo de
Esterilização a Vapor
para Uso Imediato?*



Ciclo de EVUI

NASCE | CME

DICA#2

Avalie ou realize análise de riscos quanto ao uso de EVUI como prática de rotina versus a segurança do paciente.

Embora os conjuntos de instrumentos possam representar um custo significativo para as instituições, o custo é insignificante em comparação com o prejuízo associado ao declínio da segurança e riscos de infecção do paciente.

Isso não apenas coloca o paciente em risco mas também a reputação da instituição, o perigo de ações judiciais e o credenciamento da instituição frente a organismos de acreditação.



*Você conhece as práticas
para ciclo de
Esterilização a Vapor
para Uso Imediato?*



NASCE | CME

Ciclo de EVUI

DICA#3

Estabeleça diretrizes.

Defina as regras para EVUI na CME e estabeleça diretrizes apropriadas para todos seguirem, incluindo centro cirúrgico, instrumentador cirúrgico e cirurgiões. Elabore as diretrizes em conjunto com o serviço de controle de infecção hospitalar ou submeta o documento a apreciação e anuência do mesmo. Divulgue as partes interessadas. Um registro do processo EVUI deve ser usado com o objetivo de individualizar cada processamento e com fins de rastreabilidade.



nascecme.com.br

*Você conhece as práticas
para ciclo de
Esterilização a Vapor
para Uso Imediato?*



Ciclo de EVUI

NASCE | CME



DICA#4

*Se você precisar usar EVUI,
faça com segurança.*


*As instruções de uso de tecnologias
de EVUI devem ser seguidas e os
itens a serem esterilizados devem
ser protegidos contra contamina-
ção desde a esterilização até o
ponto de uso.*

*Você conhece as práticas
para ciclo de
Esterilização a Vapor
para Uso Imediato?*



NASCE | CME

Ciclo de EVUI

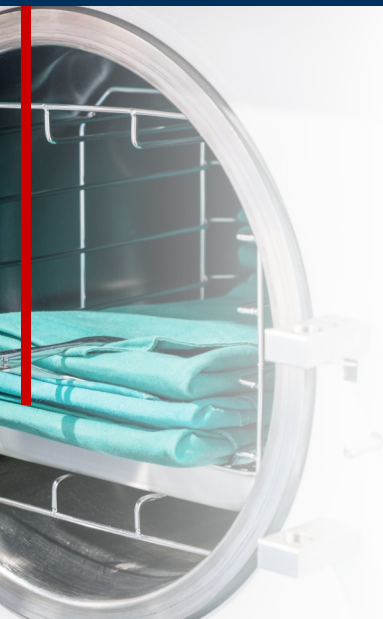

DICA#5

Reorganize as caixas cirúrgicas visando mais eficiência.

Avalie quais itens de instrumental cirúrgico são usados com maior frequência nas diferentes especialidades cirúrgicas. Conjuntos de instrumentais cirúrgicos simplificados devem ser montados incluindo esses itens. Quanto menos instrumentos no conjunto, menos tempo dispendido para processar um conjunto. Com conjuntos simplificados, o dinheiro não é desperdiçado em instrumentais cirúrgicos que raramente são usados.

nascecme.com.br

*Você conhece as práticas
para ciclo de
Esterilização a Vapor
para Uso Imediato?*



NASCE | CME

Ciclo de EVUI

DICA#6

É crucial que todos tenham um entendimento comum do que se entende por esterilização a vapor de uso imediato (EVUI) e os riscos que poderão ser decorrentes de seu uso inadequado.

A EVUI refere-se tradicionalmente a um ciclo de esterilização muito curto para uma carga muito pequena e não embalada. Uma das maiores preocupações com esse processo é que, como a carga foi desembalada, a esterilidade do dispositivo não pôde ser mantida após sua remoção do esterilizador. No entanto, como os esterilizadores melhoraram sua capacidade de permitir a penetração do vapor, tornou-se possível esterilizar com eficácia cargas embaladas ou "contidas" (por exemplo, em recipientes de metal especializados, bolsas ou cassetes) em ciclos curtos.

Os aspectos críticos para determinar se um ciclo de esterilização, provavelmente, será eficaz são encontrados nas instruções do fabricante para os vários instrumentais cirúrgicos envolvidos.

nascecme.com.br

*Você conhece as práticas
para ciclo de
Esterilização a Vapor
para Uso Imediato?*



NASCE | CME

Ciclo de EVUI

DICA#7

Utilize as seguintes perguntas para avaliar a adequação das práticas de esterilização por ciclo de uso imediato:

- 1. O esterilizador está rotulado para este ciclo pelo fabricante?*
- 2. Qual a carga recomendada pelo fabricante do esterilizador para esse ciclo?*
- 3. O recipiente utilizado está rotulado pelo fabricante para uso nesse ciclo?*
- 4. Para qual carga o recipiente é recomendado pelo fabricante?*
- 5. O indicador químico utilizado é rotulado para uso neste ciclo pelo fabricante?*
- 6. Se um indicador biológico (IB) for usado, este IB está rotulado para uso neste ciclo pelo fabricante? O IB é verificado e os dados obtidos registrados?*
- 7. Os dados de cada ciclo de esterilização a vapor de uso imediato são arquivados para fins de rastreabilidade?*